


medisana®

RM 100

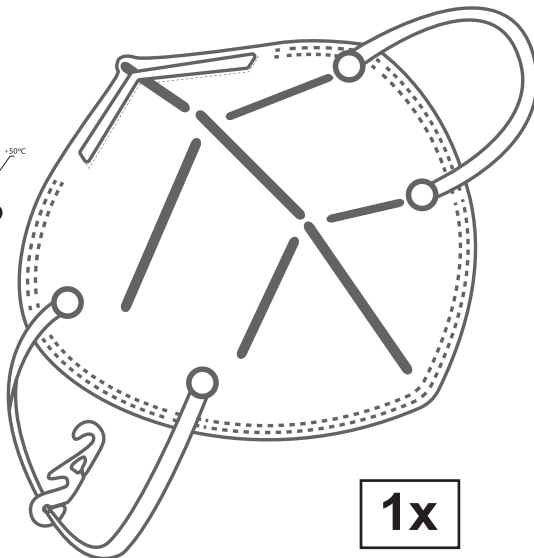

1x

Atemschutzmaske | DE
Particle Filtering Half Masks | EN
Masque respiratoire | FR
Ademhalingsbeschermingsmasker | NL
Maschera respiratoria | IT
Mascarilla respiratoria | ES
Máscara de proteção | PT
Μάσκα προστασίας αναπνοής | GR
Åndedrettsvern | NO
Mundbind | DK
Andningskyddsmask | SE
Hengityssuojain | FI
Ochranná maska | CZ
Maska chroniąca drogi oddechowe | PL
Maska za zaščito dihal | SI
Ochranná dýchacia maska | SK
Légzésvédő maszk | HU
Zaštitna maska za disanje | HR
Mască de protecție respiratorie | RO
Зaщитна маска за лице | BG
Kaitsemask | EE
Respirators | LV
Respiratorius | LT
Защитная маска | RU



medisana GmbH
Jagenbergstr. 19,
41468 NEUSS
DEUTSCHLAND

CE 2834

Standards: EN 149:2001 +A1:2009; R 2016/425

CCQS Certification Service Ltd., Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Dublin, Ireland, phone: 0035315886920, email: info@ccqs.ie

You can request the complete EU Declaration of Conformity from medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 Neuss, Germany, or you can also download it from the medisana homepage (www.medisana.com).



DE

ANWEISUNGEN ZUM ANLEGEN

- Halten Sie die Halbmaske über die Nase und den Mund.
- Ziehen Sie die Kopfbänder hinter die Ohren, und bringen Sie die Bänder am Clip an. Passen Sie den Sitz an, und überprüfen Sie die Dichtheit.
- Passen Sie den Nasenclip so an, dass er sicher um die Nase liegt, und schmiegen Sie die Enden gegen die Wangen, um eine gute Dichtheit zu erzeugen.
- Halten Sie zur Prüfung der Dichtheit beide Hände über die Maske, und atmen Sie kräftig aus. Sofern Luft aus dem Nasenraum austritt, drücken Sie den Nasenclip fester an, bei Luftaustritt an den Seiten passen Sie die Kopfbänder an.
- Wiederholen Sie die Anpassungen, bis die Maske dicht ist.
- Sollte die Maske nicht dicht sein, betreten Sie nicht den verunreinigten Bereich, da ansonsten Ansteckungsgefahr besteht.

Schutzstufe: FFP2 NR mit Schutzgrad 95 %
 Haltbarkeit: zur einmaligen kurzzeitigen Verwendung vorgesehen;
 bei Lagerung im geschlossenen Beutel: 3 Jahre.
 Größe (gefaltet): 106,7mm x 155mm
 Art. Nr.: 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)
 Lagerung: Trocken, <80 % Luftfeuchtigkeit, -30°C bis +50°C

Benutzerhinweise

Eine Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen und Warnhinweise zu dieser Maske kann zu einer Verminderung ihrer Wirksamkeit und ggf. zu Krankheiten oder Behinderungen führen. Eine Ausfertigung der Konformitätserklärung liegt jeder handelsüblichen Verpackungsgröße bei. Wie bei jedem Atemschutzgerät muss der Träger vor der Nutzung entsprechend geschult werden. Benutzer sollten vor dem Anlegen stets prüfen, ob die Maske in einem guten Gebrauchszustand sowie frei von Verunreinigungen, Schäden an den Kopfbändern usw. ist.

Einschränkung

Unter folgenden Umständen dürfen Sie die Atemschutzmaske nicht benutzen bzw. einen verunreinigten Bereich nicht betreten bzw. darin bleiben:

- Die Umgebungsluft enthält weniger als 19,5 % Sauerstoff.
- Sie riechen oder schmecken den Schadstoff.
- Zum Schutz gegen Gase oder Dämpfe.
- Die Schadstoffe oder deren Konzentrationen sind unbekannt bzw. unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährlich.
- Beim Sandstrahlen, Farbsprühen und bei Asbestbehandlungen.
- Unter explosiver Atmosphäre.

Warnhinweise

- Diese mit dem Zeichen „NR“ versehene Maske ist zur einmaligen Verwendung bestimmt.
- Die vom Hersteller vorgegebene Konfiguration darf nie ersetzt bzw. modifiziert werden, und es dürfen keine Komponenten hinzugefügt oder weggelassen werden.
- Diese Maske hilft beim Schutz vor bestimmten Partikelverunreinigungen, verhindert jedoch nicht vollständig das Risiko auf Ansteckung oder Infektion.
- Sofern Gesichtshaar unter die Gesichtsversiegelung gerät, werden die Dichtheitsanforderungen ggf. nicht erfüllt.
- Wechseln Sie umgehend die Maske, wenn Ihnen das Atmen schwerfällt oder die Maske beschädigt bzw. deformiert wird.
- Wechseln Sie die Maske, wenn die Dichtheit über dem Gesicht nicht erreicht werden kann.

Lagerung

- Lagern Sie die Maske bei Nichtverwendung in einem dichtem Behälter außerhalb der verunreinigten Bereiche.
- Bewahren Sie die Maske während des Transports in der Originalverpackung auf.

User Instructions

Failure to follow the instructions and warning on the use of this mask during all times of exposure can reduce the effectiveness of the mask and could result in illness or disability. A copy of the Declaration of Compliance will be supplied / provided with every smallest commercially available package. As with any respiratory device, the wearer must be adequately trained prior to use. Before use, the wearer should always check the mask is in good condition - no dirt, no damage to headharness attachment etc.

Limitation

Do not use the respirator or enter or stay in a contaminated area under the following circumstances:

- Atmosphere contains less than 19.5 % oxygen.
- If you smell or taste contaminant.
- For protection against gases or vapors.
- Contaminants or their concentrations are unknown or immediately dangerous to life or health.
- For sandblasting, paint-spray operations and asbestos treatment.
- In explosive atmospheres.

Warnings

- This mask marked "NR" is for single use only.
- Never substitute, modify, add, or omit parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- This mask helps protect against certain particulate contaminants but does not completely eliminate exposure to the risk of contracting disease or infection.
- It is unlikely that the requirements for leakage will be achieved if facial hair passes under the face seal.
- Change the mask immediately if breathing becomes difficult or the mask becomes damaged or distorted.
- Change the mask if a proper face seal cannot be achieved.

Storage

- Store the mask in a sealed container away from contaminated areas when not use.
- Store the mask in the original packing during transport.

Protection level: FFP2 NR with degree of protection 95 %
 Shelf life: intended for single short-term use;
 when stored in closed bag; 3 years.
 Size (folded): 106,7mm x 155mm
 Art. No.: 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)
 Storage: dry, <80% humidity, -30°C to +50°C

EN

FITTING INSTRUCTION

- Hold the particle half mask in position over the nose and mouth.
- Pull the headharness behind to ears, attach the headharness to the retaining clip, improve comfort and prevent leakage.
- Ensure the nose clip is securely moulded around the nose, resting the ends against the cheek to obtain a good seal.
- To check for proper fit, cup both hands over the mask and exhale vigorously. If air leaks around the nose, tighten the nose clip, if air leaks around the edge, reposition the headharness for better fit.
- Repeat adjustments until the mask is sealed properly.
- If a proper seal cannot be achieved do not enter the contaminated area or it may cause illness.



FR

MANUEL D'UTILISATION

1. Mettre le demi-masque de filtration des particules sur le nez et la bouche.
2. Tirer le harnais de tête derrière les oreilles, attacher le harnais de tête avec le clip de retenue, améliorer le confort et éviter des fuites.
3. S'assurer que le pince-nez est solidement moulé autour du nez en reposant les extrémités contre les joues pour obtenir une bonne fermeture.
4. Contrôler le bon positionnement, poser les deux mains sur le masque et respirer vigoureusement. S'il y a des fuites d'air autour du nez, resserrer le pince-nez, s'il y a des fuites d'air sur les bords, repositionner le harnais de tête pour un meilleur positionnement.
5. Répéter l'ajustement jusqu'à ce que le masque soit parfaitement hermétique.
6. S'il n'est pas possible de le rendre hermétique, ne pas entrer dans la zone contaminée, car cela pourrait provoquer des maladies.

Instructions d'utilisation

Le non-respect des instructions et avertissements sur l'utilisation de ce masque pendant toute la durée d'exposition peut réduire l'efficacité du masque et peut entraîner une maladie ou une invalidité. Une copie de la déclaration de conformité est fournie avec chaque plus petit paquet disponible sur le marché. Comme avec tout dispositif respiratoire, l'utilisateur doit être formé correctement avant toute utilisation. L'utilisateur doit toujours contrôler l'état du masque avant de l'utiliser, à savoir s'il est sale, si l'attache du harnais de tête est endommagée, etc.

Limitation

Ne pas utiliser le masque respiratoire ou entrer ou séjourner dans la zone contaminée dans les conditions suivantes :

1. L'atmosphère contient moins de 19,5 % d'oxygène.
2. Si vous sentez ou ingérez un contaminant.
3. Pour la protection contre les gaz et vapeurs.
4. Les contaminants ou leur concentration sont inconnus ou présentent un danger immédiat pour la vie ou la santé.
5. Pour des opérations de sablage, et de pulvérisation de peinture et le traitement de l'amiante.
6. Dans des atmosphères explosibles.

Avertissements

1. Ce masque marqué du sigle « NR » convient à un usage unique seulement.
2. Ne jamais remplacer, modifier, ajouter ou omettre la configuration telle que spécifiée par le fabricant.
3. Ce masque aide à protéger contre certains contaminants particuliers, mais ne peut pas éliminer totalement l'exposition aux risques de contraction de maladies ou infections.
4. Il est donc improbable que les exigences sur l'étanchéité soient obtenues si la pilosité faciale passe en dessous du joint facial.
5. Changer immédiatement le masque si la respiration devient difficile ou si le masque est endommagé ou déformé.
6. Changer de masque s'il n'est pas possible de le rendre hermétique sur le visage.

Conservation

1. Conserver le masque dans un conteneur hermétique éloigné de zones contaminées s'il n'est pas utilisé.
2. Conserver le masque dans son emballage d'origine pendant le transport.

Niveau de protection : FFP2 NR avec un niveau de protection de 95 %.
 Durée de conservation : destiné à un usage unique à court terme lorsque le produit est entreposé dans un sachet fermé : 3 ans.
 Taille (plié) : 106,7 mm x 155 mm
 Art. N° : 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)
 Stockage : Sec, < 80 % d'humidité, -30 °C à +50 °C

Gebruiksaanwijzing

Als u de instructies en waarschuwing voor gebruik van dit masker niet te allen tijde opvolgt, kan blootstelling de effectiviteit van het masker aantasten, wat kan resulteren in ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zelfs bij het kleinste commercieel beschikbare pakket wordt een kopie van de Conformiteitsverklaring meegeleverd. Zoals bij elk ademhalingsmiddel het geval is, moet de drager vóór gebruik correct worden geïnstrueerd. Voor gebruik moet de drager ook altijd controleren of het masker in goede staat verkeert – geen vuil, geen schade aan de hoofdband.

Beperking

Gebruik het masker niet en ga geen besmet gebied binnen/bijf niet in een besmet gebied onder de volgende omstandigheden:

1. De atmosfeer bevat minder dan 19,5% zuurstof.
2. U ruikt of proeft schadelijke stoffen.
3. Voor bescherming tegen gas of damp.
4. Schadelijke stoffen of concentraties daarvan zijn onbekend of direct gevaarlijk voor de gezondheid of zelfs levensgevaarlijk.
5. Voor zandstralen, verspraywerkzaamheden en asbestbehandeling.
6. In een omgeving met explosiegevaar.

Waarschuwingen

1. Dit masker dat is gemarkeerd met "NR" is bedoeld voor eenmalig gebruik.

2. De configuratie zoals gespecificeerd door de fabrikant mag nooit worden vervangen of gewijzigd en er mogen nooit dingen aan worden toegevoegd of dingen worden weggehalen.
3. Dit masker helpt om u te beschermen tegen bepaalde schadelijke stoffen, maar helpt niet volledig tegen blootstelling aan het risico een ziekte of infectie op te lopen.
4. Het is onwaarschijnlijk dat er lekken zullen ontstaan als er gezichtshaar door de gezichtsbedekking heen komt.
5. Vervang het masker meteen als ademhalen moeilijk wordt of als het masker beschadigd of vervormd raakt.
6. Vervang het masker als het gezicht niet goed bedekt kan worden.

Opslag

1. Bewaar het masker als u het niet gebruikt in een afgesloten bewaar middel uit de buurt van besmette gebieden.
2. Bewaar het masker in de originele verpakking tijdens transport.

Beschermingsklasse: FFP2 NR met beschermingsgraad 95 %
 Houdbaarheid: bedoeld voor eenmalig kortdurend gebruik, max. 3 jaar houdbaar indien bewaard in een gesloten zak.
 Afmetingen (opgevoeven): 106,7 mm x 155 mm
 Art. nr.: 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)
 Bewaren: droog, <80% luchtvochtigheid, -30°C tot +50°C

NL

BEVESTIGINGS- INSTRUCTIE

1. Houd het mondkapje in positie over neus en mond.
2. Trek de hoofdband achter de oren, bevestig de hoofdband aan de bevestigingsclip, zorg dat hij comfortabel zit en voorkom lekken.
3. Zorg ervoor dat de neusclip goed om de neus heen zit, waarbij de uiteinden tegen de wang rusten voor een goede afdekking.
4. Om te controleren of alles goed vastzit, vormt u de handen als kommetjes over het masker en haal u diep adem. Als er lucht rondom de neus lekt, trek dan de neusclip aan, als er lucht aan de rand lekt, herpositioneer dan de hoofdband tot hij beter zit.
5. Herhaal aanpassingen totdat het masker overall goed aansluit.
6. Als dat niet lukt, ga dan geen besmet gebied in, anders kan dat ziekte veroorzaken.



IT

COME INDOSSARE LA SEMIMASCHERA

1. Posizionare la semimaschera sopra il naso e la bocca.
2. Tirare i laccetti per il capo dietro alle orecchie e fissarli alla clip di aggancio per migliorare la vestibilità e prevenire la fuoriuscita.
3. Modulare il clip nasale in modo ben saldo attorno al naso, appoggiando le estremità alle guance per assicurare che sia fissato saldamente.
4. Per controllare che la mascherina sia fissata correttamente, disporre le mani a forma di coppa sopra la mascherina ed espirare con forza. Se attorno al naso esce dell'aria, stringere la clip nasale, se esce dell'aria in prossimità delle orecchie, regolare gli elastici per il capo per fissarli meglio.
5. Regolare fino a quando la mascherina è fissata correttamente.
6. Se non è possibile ottenere un fissaggio corretto, non entrare nella zona contaminata per evitare danni alla salute.

Istruzioni per l'uso

L'inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze relative all'uso di questa mascherina durante l'esposizione può ridurre la sua efficacia e causare danni alla salute o disabilità. Una copia della dichiarazione di conformità viene allegata/fornita ad ogni singola confezione disponibile in commercio. Come per ogni dispositivo per il uso respiratorio, l'utente deve essere adeguatamente istruito prima dell'utilizzo. Prima dell'uso, l'utente deve sempre verificare che la mascherina sia in buone condizioni, priva di sporco e che non presenti danni alla clip di fissaggio dietro al capo ecc.

Limitazioni

- Non utilizzare la mascherina, entrare o sostare in un'area contaminata nelle seguenti circostanze:
1. Se l'atmosfera contiene meno di 19,5 % di ossigeno.
 2. Se si percepisce l'odore o il sapore della sostanza contaminante.
 3. Per la protezione contro gas o vapori.
 4. Se i contaminanti o le loro concentrazioni non sono noti o rappresentano un pericolo immediato per la vita o la salute.
 5. Per lavori di sabbiatura, verniciatura a spruzzo e trattamenti con l'amianto.
 6. In atmosfere esplosive

Avvertenze

1. Il marchio "NR" su questa mascherina indica che è monouso.
2. Non sostituire, modificare, integrare o omettere parti della sua struttura come specificato dal produttore.
3. La presente mascherina serve a proteggere contro determinate particelle contaminanti ma non elimina completamente il rischio di contrarre malattie o infezioni.
4. È improbabile che vengano raggiunti i requisiti relativi alle fuoriuscite se i peli del viso passano al di sotto della chiusura del viso.
5. Sostituire immediatamente la mascherina se la respirazione diventa faticosa o la mascherina si danneggia o deforma.
6. Sostituire la mascherina se non è possibile raggiungere un corretto fissaggio sul viso.

Conservazione

1. Quando non viene utilizzata, conservare la mascherina in un contenitore sigillato lontano dalle aree contaminate.
2. Conservare la mascherina nella confezione originale durante il trasporto.

Livello di protezione: FFP2 NR con grado di protezione 95 %
 Scadenza: prodotto destinato a un unico utilizzo di breve durata;
 in caso di conservazione in busta chiusa: 3 anni.
 Dimensioni (piegata): 106,7 mm x 155 mm
 N° art.: 33333 (VPE 10); 33335 (VPE 5)
 Conservazione: asciutto, <80% umidità dell'aria, -30°C fino a +50°C

ES

Instrucciones de uso

El incumplimiento de las instrucciones y advertencias sobre el uso de esta mascarilla durante todos los tiempos de exposición puede reducir la efectividad de la mascarilla y dar lugar a una enfermedad o discapacidad. Se suministrará/proporcionará una copia de la Declaración de conformidad con cada envase mínimo disponible en el comercio. Como con cualquier dispositivo respirador, el usuario debe ser correctamente instruido antes del uso. Antes de usarla, el usuario debe comprobar siempre que la mascarilla se halle en buen estado, que no esté sucia, no presente daños en la fijación de la pieza para la cabeza, etc.

Limitaciones

- No use el dispositivo ni entre o permanezca en un área contaminada en las siguientes circunstancias:
1. Si la atmósfera contiene menos de un 19,5 % de oxígeno.
 1. Si huele o nota el sabor de una sustancia contaminante.
 3. Con fines de protección frente a gases o vapores.
 4. Si las sustancias contaminantes o sus concentraciones son desconocidas o suponen un peligro directo para la vida o la salud.
 5. Para la limpieza con arena, las operaciones con pintura en spray y el tratamiento de amianto.
 6. En atmósferas explosivas.

Advertencias

1. La marca «NR» en esta mascarilla indica que es de un solo uso.
2. No sustituya, modifique, añada ni omita nunca partes de la configuración especificadas por el fabricante.
3. Esta mascarilla ayuda a proteger frente a determinadas sustancias contaminantes en partículas, pero no elimina por completo la exposición al riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
4. Es improbable que se alcancen los requisitos para evitar fugas si sobresale vello facial del sellado de la cara.
5. Cambiarse la mascarilla de inmediato si se le hace difícil respirar o si la mascarilla sufre daños o distorsiones.
6. Cambiarse la mascarilla si no puede conseguirse un sellado correcto de la cara.

Almacenamiento

1. Guarde la mascarilla en un recipiente sellado y apartado de las áreas contaminadas cuando no la esté usando.
2. Guarde la mascarilla en el envase original durante el transporte.

Clase de protección: FFP2 NR con un nivel de protección del 95 %
 Vida útil: destinado a un solo uso de corto plazo;
 almacenamiento en una bolsa cerrada, 3 años.
 Tamaño (plegada): 106,7 mm x 155 mm
 N° art.: 33333 (VPE 10); 33335 (VPE 5)
 Almacenamiento: seco, humedad <80%, -30 °C hasta +50 °C

ISTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

1. Ponga la mascarilla semi-facial de filtro en posición sobre la nariz y la boca.
2. Tire de la pieza para la cabeza hacia detrás de las orejas y fija la clip de retención para mejorar la comodidad e impedir fugas.
3. Ajuste el clip para la nariz de forma segura alrededor de esta, apoyando los extremos en la mejilla para una buena fijación.
4. Para comprobar que esté correctamente colocada, ponga las dos manos formando una copa sobre la mascarilla y exhale con fuerza. Si se escapa aire por alrededor de la nariz, apriete el clip para la nariz; si sale aire por alrededor del borde, vuelva a colocar mejor la pieza para la cabeza.
5. Repita los ajustes hasta que la mascarilla esté correctamente sellada.
6. Si no puede conseguirse un sellado correcto, no entre en el área contaminada, o podría enfermarse.



PT

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

1. Segure a semimáscara e coloque-a sobre o nariz e a boca.
2. Puxe os elásticos para trás das orelhas e prendo-os ao clipe de retenção, ajuste para uso confortável e evite fugas.
3. Certifique-se de que o clipe nasal se molda bem à volta do nariz, de forma que as suas extremidades fiquem pousadas sobre as bochechas e haja uma boa vedação.
4. Para verificar se a semimáscara está corretamente colocada, coloque as duas mãos em concha sobre a máscara e expire fundo. Se verificar que passa ar à volta do nariz, aperte o clipe nasal. Se passar ar à volta da extremidade, reposicione os elásticos para que fiquem mais bem ajustados.
5. Volte a ajustar as vezes que forem necessárias até que a máscara não deixe passar ar.
6. Se não for possível vedar a máscara corretamente, não entre na área contaminada porque poderá ficar doente.

Instruções de utilização

Se as instruções e os avisos relativos à utilização não forem sempre seguidos, a eficácia da máscara pode ser reduzida e o utilizador pode ficar doente ou incapacitado. Será fornecida uma cópia da Declaração de Conformidade, inclusive com a embalagem mais pequena disponível no mercado. Tal como acontece com qualquer dispositivo respiratório, o utilizador tem de estar devidamente familiarizado com a máscara antes de a usar. O utilizador deve sempre insistir na máscara antes de a usar para confirmar se esta se encontra em bom estado, ou seja, se não apresenta sujidade, danos nos elásticos, etc.

Limitação

Não use o respirador nem entre ou permaneça numa área contaminada nos seguintes casos:

1. Se a atmosfera contiver menos de 19,5 % de oxigénio.
2. Se sentir o cheiro ou o gosto de contaminantes.
3. Para se proteger contra gases ou vapores.
4. Se os contaminantes ou as suas concentrações forem desconhecidos ou extremamente perigosos para a vida e para a saúde.
5. Para realizar operações de limpeza a jato de areia, de pintura com spray e de remoção de amianto.
6. Em ambientes explosivos.

Avisos

1. Esta máscara com marcação "NR" destina-se apenas a uma única utilização.
2. Nunca substitua, modifique, adicione ou omita partes da configuração, conforme especificado pelo fabricante.
3. Esta máscara ajuda a proteger contra certos contaminantes particulados, mas não elimina totalmente a exposição ao risco de contrair uma doença ou infeção.
4. Dificilmente se cumprirão os requisitos relativos a fugas no caso de haver pelo facial sob a máscara.
5. Troque imediatamente de máscara se sentir dificuldades em respirar ou se a máscara ficar danificada ou deformada.
6. Troque de máscara se não for possível haver uma boa vedação facial.

Armazenamento

1. Quando não estiver a usar a máscara, guarde-a num recipiente vedado afastado das áreas contaminadas.
2. Mantenha a máscara na embalagem original durante o transporte.

Nível de proteção: FFP2 NR com grau de proteção de 95 %

Validade: concebido para utilização única a curto prazo; quando armazenado em um saco fechado: 3 anos.

Tamanho (dobrado): 106,7mm x 155mm

Art. N.º: 33333 (VPE 10), 33336 (VPE 5)

Armazenagem: Seco, <80% humidade relativa, -30°C a +50°C

GR

Υποδείξεις για τον χρήστη

Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης και των προειδοποιητικών υποδείξεων σχετικά με αυτή τη μάσκα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της αποτελεσματικότητάς της και ενδεχομένως ασθένειες ή αναπηρίες. Ένα αντίστοιχο δείγμα δήλωσης συμμόρφωσης επισυνάπτεται σε κάθε σύνθηρες μέγιστης συσκευασίας. Όπως και σε κάθε συσκευή αναπνευστικής προστασίας ο χρήστης πρέπει να εκπαιδεύεται στη χρήση. Πριν φορέσει τη μάσκα, ο χρήστης πρέπει πάντα να βεβαιώνονται πως η μάσκα βρίσκεται σε όπτη κατάσταση προς χρήση, πως είναι καθαρή από βρωμίες και πως τα λάστιχα συγκράτησης δεν εμφανίζουν σημάδια φθοράς.

Περιορισμός

Υπό τις ακόλουθες συνθήκες η χρήση της μάσκας προστασίας αναπνευστικής ή/και εισόδου/παράρρησις σε μια μολυσμένη περιοχή δεν επιτρέπεται.

1. Η περιεκτικότητα του αέρα περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 19,5%.
2. Εάν αισθάνεστε την οσμή ή τη γεύση της επιβλαβούς ουσίας.
3. Ως μέσο προστασίας από αέρια και ατμούς.
4. Εάν οι επιβλαβείς ουσίες ή οι συγκεντρώσεις τους δεν είναι γνωστές ή/και ενέχουν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή και την υγεία.
5. Σε αμοιβολή, ψεκασμό βαφής και επεξεργασία αμιαντού.
6. Σε εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Υποδείξεις προειδοποίησης

1. Η συγκεκριμένη μάσκα με την ένδειξη «NP» είναι μιας χρήσης.

2. Η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή διαμόρφωση δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί ή/και τροποποιηθεί και δεν επιτρέπεται η προσθήκη ή η παράλειψη εξαρτημάτων.
3. Η συγκεκριμένη μάσκα προορίζεται από ορισμένους τύπους σωματιδίων, ωστόσο, δεν εμποδίζει πλήρως τον κίνδυνο μετάδοσης ή μόλυνσης.
4. Εάν ανακρίνουν τρήρες του προσιπού κάτω από τα άκρα σφράγισης, οι απαιτήσεις στεγανότητας ενδεχ. δεν πληρούνται πλέον.
5. Αλλάξτε αμέσως τη μάσκα εάν δυσκολευθεί στην αναπνοή ή εάν η μάσκα έχει υποστεί ζημιά ή/και παραμορφώσεις.
6. Αλλάξτε τη μάσκα εφόσον δεν επιτυγχάνεται η στεγανοποίηση των ακρών στο πρόσωπο.

Αποθήκευση

1. Όταν δεν την χρησιμοποιείτε, φυλάσσετε τη μάσκα σε ένα αεροστεγές δοχείο μακριά από τις μολυσμένες περιοχές.
2. Κατά τη μεταφορά, φυλάσσετε τη μάσκα στην αυθεντική της συσκευασία.

Επίπεδο προστασίας: FFP2 NR D με βαθμό προστασίας 95%
Διάρκεια ζωής: προορίζεται για μία χρήση σύντομης διάρκειας. Σε συνθήκες αποθήκευσης σε κλειστή συσκευασία: 3 έτη.

Μέγεθος (διπλωμένη): 106,7mm x 155mm

Κωδ. Αρ.: 33333 (VPE 10), 33336 (VPE 5)

Αποθήκευση: σε ξηρό χώρο, <80% ατμοσφαιρική υγρασία, -30°C έως +50°C

Οδηγίες τοποθέτησης

1. Κρατήστε τη μάσκα πίσω από τα αυτιά και το στόμα.
2. Τραβήξτε τα λάστιχα πίσω από τα αυτιά και τοποθετήστε τα στο κλιπ. Προσαρμόστε την εφαρμογή και ελέγξτε τη στεγανότητα.
3. Προσαρμόστε το κλιπ της μύτης κατά τρόπο, ώστε να περικλείει τη μύτη και πιέστε τα άκρα στα μάγουλα προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής στεγανότητα.
4. Για να ελέγξετε τη στεγανότητα κρατήστε τα δύο άκρα μπροστά από τη μάσκα και εκνεύστε δυνατά. Εάν διαπιστώσετε διαφυγή του αέρα από την περιοχή της μύτης πιέστε πιο δυνατά το κλιπ μύτης, εάν η διαφυγή παρατηρείται στις πλευρές προσαρμόστε τα λάστιχα συγκράτησης.
5. Επισυνάψτε την προστατευτική μέχρι η μάσκα να είναι στεγανή.
6. Εάν η μάσκα δεν είναι στεγανή μην εισέλθετε στη μολυσμένη περιοχή γιατί υφίσταται κίνδυνος μετάδοσης.



DK

Anvisninger om påsætning

1. Hold halvmasken over næsen og munden.
2. Træk hovedbåndet bag ørerne, og anbring båndet ved klemmen. Tilpas placeringen, og kontroller at den sidder tæt.
3. Tilpas næseklemmen så den sidder sikkert på næsen, og glat enderne mod kinderne for at de sidder rigtig tæt.
4. For at kontrollere tæthedens skal du holde masken med begge hænder og ånde kraftigt ud. I det øjeblik luften kommer ud af næsen, skal du trykke næseklemmen fast. Kommer der luft ud af sideme så tilpas hovedbåndet.
5. Gentag tilpasningen indtil masken sidder helt tæt.
6. Hvis masken ikke sidder helt tæt, så gå ikke ind i det forurenede område, da der så er fare for smitte.

Brugervejledning

Hvis brugervejledningen og advarselsanvisningen til denne maske ikke overholdes, kan det føre til en nedsættelse af din effektivitet og evt. til sygdomme eller handicap. Der medfølger en beskrivelse af overensstemmelseserklæringen med enhver kommerciel tilgængelig emballagestørrelse. Brugeren skal, som ved ethvert åndedrætsværn, uddannes i forhold til brugen. Brugeren skal for påsætningen kontrollere om, masken er i en god brugststand såvel som fri for forurening, skader på hovedbåndet osv.

Begrænsning

Under en følelse af omstændigheder må åndedrætsmasken ikke bruges, og man må ikke betræde et forurenede område eller opholde sig der:

1. Den omgivende luft indeholder mindre end 19,5 % ilt.
2. Du kan lugte eller smage skadestoffer.
3. Ti beskyttelse mod gas eller dampe.
4. Skadestofferne eller deres koncentration er ikke kendte dvs. umiddelbart livs- eller sundhedsfarlige.
5. Ved sandblåsning, farvesprøjtning og ved asbestbehandling.
6. I en eksplosiv atmosfære.

Advarsler

1. De masker, som er forsynet med tegnet »NR«, er kun beregnet til engangsbrug.
2. Den af producenten angivne konfiguration må aldrig erstattes eller modificeres, og ingen komponenter må tilføjes eller fjernes.
3. Masken hjælper til beskyttelse mod bestemt partikkelforurening, men forhindrer dog ikke helt risikoen for smitte eller infektion.
4. Hvis der kommer ansigtshår under ansigtsforseglingen, opfyldes tæthedskravene evt. ikke.
5. Udskift omgående masken, når du synes, det er svært at ånde eller masken er beskadiget eller deformet.
6. Udskift masken, når den ikke længere sidder tæt hen over ansigtet.

Opbevaring

1. Opbevar masken, når den ikke anvendes, i en tæt beholder uden for det forurenede område.
2. Opbevar masken i originalembalagen, når den transporteres.

Beskyttelsesklasse: FFP2 NR D med beskyttelsesgrad 95%
 Holdbarhed: beregnet for kortvarigt engangsbrug; ved opbevaring i lukket pose: 3 år.
 Størrelse (sammenfoldet): 106,7 mm x 155 mm
 Art. nr.: 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)
 Opbevaring: Tørt, <80% luftfugtighed, -30 °C til +50 °C

NO

Bruksanvisning

Hvis instruksjonene og advarslene ikke følges til enhver tid ved bruk av denne masken kan det nedsatte effektiviteten til masken, og føre til sykdom og uferdighet. En kopi av samsvarserklæringen leveres med alle pakninger, selv de minste tilgjengelige pakningene som er i handelen. Som det er tilfelle med alle pustenretninger må brukeren inneha tilstrekkelig trening før bruk. Før bruk må brukeren alltid kontrollere at masken er i god stand – at den ikke er skitten, ikke har noen skader på hovedbåndene, osv.

Begrensning

Ikke bruk prusteutstyret eller opphold deg i det forurenede område ved følgende forhold:

1. Omgivelser som inneholder mindre enn 19,5 % oksygen.
2. Hvis du lukter eller smaker forurenende stoffer.
3. Som beskyttelse mot gasser eller damper.
4. Forurenende stoffer eller ved konsentrasjoner som er ukjente eller som er farlige for liv eller helse.
5. Ved sandblåsning, spraymaling og ved behandling av asbest.
6. I eksplosive atmosfærer.

Advarsler

1. Denne masken er merket "NR", og er kun til engangsbruk.
2. Delel må aldri skiftes ut, modifiseres, legges til eller fjernes ved den bruken som er angitt av produsenten.
3. Denne masken bidrar til beskyttelse mot spesielle, forurenende partikler, men eliminerer ikke helt risikoen for at man pådrar seg sykdom eller infeksjon.
4. Det er usannsynlig at kravene med hensyn på lekkasje dekkes hvis ansiktshår befinner seg under masken.
5. Skift masken straks hvis det blir vanskelig å puste eller masken blir skadet eller mister formen.
6. Skift ut masken hvis det ikke er mulig å oppnå at den sitter tett.

Oppbevaring

1. Oppbevar masken i en forseglest pose, ulla forurenede områder når den ikke er i bruk.
2. Oppbevar masken i originalembalassen under transport.

Beskyttelsesnivå: FFP2 NR med beskyttelsesgrad 95 %
 Holdbarhet: beregnet for kortvarig engangsbruk; ved lagring i lukket pose: 3 år.
 Størrelse (brettet) 106,7 mm x 155 mm
 Art. nr.: 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)
 Oppbevaring: Tørt, <80 % luftfuktighet, -30 °C til +50 °C

INSTRUKSJONER FOR TILPASNING

1. Hold partikkelmasken i stilling over nese og munn
2. Trekk hovedbåndene bakover til ørene, fest hovedbåndene til klemmen, og pass på at den sitter behagelig samtidig til den forhindrer lekkasje.
3. Sikre at neseklypen er formet rundt nesen, og at endene hviler på kindene for å oppnå god tetning.
4. For å kontrollere at den sitter tett, hold begge hendene over masken og pust kraftig ut. Hvis det lekker ut luft rundt nesen, stram neseklypen, hvis masken lekker rundt kanten, reguleres hovedbåndet slik at masken sitter bedre.
5. Gjenta justeringen til masken sitter tett.
6. Hvis det ikke er mulig å få masken tett, må du ikke gå inn i det forurenede området da dette kan forårsakesykdom.



SE

INSTRUKTIONER

- Håll partikelhalvmasken på plats över näsa och mun.
- Dra huvudremarna bakom öronen, fäst remarna på spännet, förbättra komforten och förhindra läckage.
- Se till att näsklämman slutar tät runt näsan och att ändarna ligger mot kinden för att få en bra tätning.
- För att kontrollera om masken sitter korrekt, kupa båda händerna över masken och andas kraftigt ut. Om luft läcker runt näsan, dra åt näsklämman, om luft läcker runt kanten, justera huvudremarna för bättre passform.
- Upprepajusteringsgarna till masken sitter ordentligt tät.
- Om en korrekt tätning inte kan uppnås, gå in i i det kontaminerade området, annars kan det leda till sjukdom.

Användarinstruktioner

Om dessa instruktioner och varningar för användning av denna mask inte följs under all exponering kan maskens effektivitet minska och sjukdomer eller funktionshinder kan uppstå. En kopia av försäkringen om överensstämmelse bifogas/levereras med varje minsta kommersiellt tillgänglig förpackning. Som för alla andningskydd måste användaren här lämplig utbildning innan. Före användning ska användaren alltid kontrollera att masken är i god skick - ingen smuts, inga skador på fästena vid huvudremarna osv.

Begränsningar

Använd inte andningskyddet eller gå in eller stanna i ett förorenat område under följande förhållanden:

- Luften innehåller mindre än 19,5 % syre.
- Om lukt eller smak av föroreningar finns.
- Som skydd mot gaser eller ångor.
- Föroreningar eller deras koncentrationer är ökända eller direkt farliga för liv eller hälsa.
- För sandblåstring, färgsprutning och asbesthantering.
- I explosiva miljöer.

Varningar

- Denna mask märkt "NR" är endast för engångsbruk.
 - Ersätt, modifiera, lägga till eller utlämna aldrig delar i konfigureringen som anges av tillverkaren.
 - Denna mask hjälper att skydda mot vissa partikelformiga föroreningar men eliminerar inte risken att drabbas av sjukdom eller infektion helt.
 - Det är osannolikt att kraven på tätning uppnås om hår sticker ut under ansiktsskyddet.
 - Byt masken omedelbart vid andningsvärgreter eller om masken skadas eller förvrängs.
 - Byt mask om en korrekt ansiktstättning inte kan uppnås.
- Lagring**
- Förvara masken i en sluten behållare borta från förorenade områden när den inte används.
 - Förvara masken i originalförpackningen under transport.

Skydds nivå: FFP2 NR med skyddsgrad 95 %

Hälbarhet: avsedd för en enda användning under en begränsad tid;

vid förvaring i sluten påse: 3 år.

Storlek (viktt): 106,7 mm x 155 mm

Art.nr: 33333 (VPE 10), 33336 (VPE 5)

Lagring: torr, < 80 % luftfuktighet, -30 °C till +50 °C

FI

Käyttäjän ohjeistus

Jos maskin käyttöä koskevia ohjeita ja varoituksia ei noudateta koko altistumisen ajan, maskin tehokkuus voi heikentyä ja tämä voi johtaa sairauten tai vammoin.

Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta toimitetaan jokaisen pienimmän kaupallisesti saatavan pakkauksen mukana. Kuten kaikkien hengityslaitteiden kohdalla, käyttäjän on oltava asianmukaisesti koulutettu ennen käyttöä. Ennen käyttöä käyttäjän on aina tarkistettava, että maski on hyvässä kunnossa – että siinä ei ole illea, vaurioita pääväljään kiinnityksessä jne.

Rajotukset

- Älä käytä hengityssuojainta tai mene saastuneelle alueelle tai pysy siinä seuraavissa olosuhteissa:
- Ilmakehä sisältää happea alle 19,5 %.
 - Jos haistat tai maistat epäpuhtauksia.
 - Kaasuilla tai höyryillä suojaamiseksi.
 - Epäpuhtaudet tai niiden pitoisuudet ovat tuntemattomia tai välittömästi hengelle tai terveydelle vaarallisia.
 - Hiekkapuhalluksessa, maalin ruiskutuksessa ja asbestin käsittelyssä.
 - Rajahälysaattissa ympäristössä.

Varoitukset

- Tämä maski, jossa on merkintä "NR", on tarkoitettu vain kertakäyttöön.
- Älä koskaan korvaa, muokkaa, lisää tai muuta osia valmistuksessa määritellyssä kokoonpanossa.
- Tämä maski auttaa suojautumatta tietyillä hiukkasmaisilla epäpuhtauksilla, mutta se ei ehkäise altistumista sairaus- tai tartuntavaaroille kokonaan.
- En epätodennäköistä, että vuotola koskevat vaatimukset täyttyvät, jos kasvoitteen alla on partakarvoja.
- Vaihda maski heti, jos hengitys vaikeutuu tai jos maski vaurioituu tai vääristyy.
- Vaihda maski, jos riittävää tiivyyttä ei saavuteta.

Säilytys

- Varastoi maski suljetussa astiassa kaukana saastuneista alueista, kun et käytä sitä.
- Säilytä maski alkuperäisissä pakkausissa kuljetuksen aikana.

Suojausluokka: FFP2 NR suojausaste 95 %

Säilyvyys: tarkoitettu kertakäyttöiseen lyhytaikaiseen käyttöön;

varastointi suljetussa pussissa; 3 vuotta.

Koko (tallettuna): 106,7 mm x 155 mm

Tuotenumero: 33333 (VPE 10), 33336 (VPE 5)

Varastointi: kuivassa, ilmakehässä < 80 %, -30 °C – +50 °C

KÄYTTÖOOTTO

- Pida hiukassuodattimellista puolimaskia paikallaan nenän ja suun yläpuolella.
- Vedä pääväljat korvien taakse, kiinnitä pääväljat pitkäkeeseen, aseta mukavasti ja niin, että ilmaa ei vuoda.
- Varmista, että nenäpidike on sovitettu nenän ympärille kunnolla niin, että sen päät ovat poskea vasten, jotta tiivys olisi hyvä.
- Pida molempia käsiä voimakkaasti varmistaaksesi siitä, että maski istuu kunnolla. Jos ilmaa vuotaa nenän ympärille, kiristä nenäpidike. Jos ilmaa vuotaa reunasta, sovita pääväljat paremmin.
- Toista säädöt, kunnes maski istuu tiiviisti.
- Jos asianmukaisesti tiivyyttä ei saada aikaan, älä mene saastuneelle alueelle, se voi aiheuttaa sairautumisen.



CZ

POKYNY PRO NASAZOVÁNÍ

- Podržte polomaska přes nos a ústa.
- Natáhněte upínací pásky za uši a pásky upevněte na svorce. Pohodlně polo masku usadte a zkontrolujte její těsnost.
- Nosní svorku upravte tak, aby ležela bezpečně kolem nosu a konce přitiskněte pomocí prstů lícům pro vytvoření dobré těsnosti.
- Pro ověření těsnosti podržte obě ruce přes masku a silně vydechněte. Pokud vystupuje z prostoru nosu vzduch, přitiskněte nosní svorku pevněji, v případě výstupu vzduchu na bočích, upravte upínací pásky.
- Zopakujte tyto úpravy, dokud maska nebude těsná.
- Pokud maska netěsní, nevstupujte do kontaminované oblasti, protože hrozí nebezpečí nakažení.

Pokyny pro uživatele

Neodporujeme pokyny k použití a výstražných upozornění k této masce může způsobit snížení její účinnosti a případně vést k nemožnosti či poškození. Jedno vyjádění prohlášení o vlastnostech je přiloženo ke každé běžné obchodní velikosti balení. Stejně jako u každého přístroje na ochranu dýchacích cest musí být osoba nosící masku příslušně poučena. Uživatelé by měli před nasazením masky vždy ověřit, zda je maska v dobrém stavu pro použití a bez nečistot, poškození upínacích pásků atd.

Omezení

- Za následujících okolností nesmí být masky pro ochranu dýchacích cest používány, resp. není dovoleno vstoupit do kontaminované oblasti, resp. tam setrvalát:
- Okolní vzduch obsahuje méně než 19,5 % kyslíku.
 - V nose nebo na jazyku cítíte škodlivou látku.
 - K ochraně proti plynům nebo páram.
 - Škodlivé látky nebo jejich koncentrace nejsou známe, resp. bezprostředně ohrožují život nebo zdraví.
 - Při pískování, nanášení barvy stříkaním a zpracování azbestu.
 - Ve výbušné atmosféře.

Výstražná upozornění

- Tato maska označena značkou „NR“ je určena k jednorázovému použití.
- Konfigurace stanovená výrobcem nesmí být nikdy nahrazena jinou, resp. upravena, a nesmí být přidány či vymečány žádné komponenty.
- Tato maska pomáhá při ochraně proti určitým znečištěním částicemi, nezamezují však zcela riziko nakažení nebo infekce.
- Pokud se pod utěsnění obličje dostane obličejový chloupěk, usudíto pásk či případně splnitý požadavek na těsnost.
- Masku ihned vyměňte, pokud se vám dýchá těžka nebo pokud je maska poškozená, či zdeformovaná.
- Masku vyměňte, pokud nelze dosáhnout těsnosti nad obličjem.

Skladování

- Při nepoužití masku uložte do neprodyšně uzavřených nádob mimo kontaminovanou oblast.
- Během přepravy masku uchovávejte v originálním obale.

Stupeň ochrany: FFP2 NR s účinností ochrany 95 %
 Životnost: určeno k jednorázovému krátkodobému použití;
 při skladování v uzavřeném sáčku: 3 roky.
 Velikost (skládaná): 106,7 mm x 155 mm
 Č. výt.: 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)
 Skladování: v suchu, vlhkost vzduchu <80 %, teplota -30 °C až +50 °C

Instrukce dla użytkownika

Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń dotyczących używania maski przez cały czas narażania może zmniejszyć skuteczność maski i może doprowadzić do choroby lub niepełnosprawności. Kopia deklaracji zgodności jest dołączona / dostarczana z najmniejszym dostępnym w rynku opakowaniem. Tak jak w przypadku każdego urządzenia do oddychania, użytkownik musi zostać odpowiednio przeszkolony przed wzięciem maski. Przed zastosowaniem użytkownik powinien sprawdzić, czy maska jest w dobrym stanie – czy nie ma zabrudzeń, uszkodzeń łamiących mocujących, itp.

Ograniczenia

- W następujących okolicznościach nie należy używać respiratora, wchodząc ani przebywając zanieczyszczonym miejscu:
- Atmosfera zawiera mniej niż 19,5 % tlenu.
 - Jeśli czuć zapach lub smak zanieczyszczenia.
 - Do ochrony przed gazami lub oparami.
 - Gdy zanieczyszczenia lub ich stężenia są nieziane lub bezpośrednio niebezpieczne dla życia lub zdrowia.
 - Podczas piaskowania, malowania natryskowego i obróbki azbestu.
 - W atmosferze wybuchowych.

Ostrzeżenia

- Maska oznaczona „NR” jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku.
- Nie wolno zastępować, modyfikować, dodawać lub usuwać części do konfiguracji określonej przez producenta.
- Maska pomaga chronić przed niektórymi cząstkami zanieczyszczeń, ale nie eliminuje całkowicie ryzyka zarażenia się chorobą lub infekcją.
- Spełnienie wymagań dotyczących szczelności jest mało prawdopodobne, jeśli włosy z twarzy dostaną się pod uszczelnienie twarzy.
- Maskę należy natychmiast wymienić, jeśli oddychanie staje się trudne lub gdy maska jest uszkodzona lub zniekształcona.
- Maskę należy wymienić, jeśli nie można uzyskać właściwego uszczelnienia twarzy.

Przechowywanie

- Gdy maska nie jest używana, należy ją przechowywać w szczelnym pojemniku z dala od zanieczyszczonych obszarów.
- Podczas transportu maskę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Klasa ochrony: FFP2 NR ze stopniem ochrony 95 %
 Tworzący: przeznaczona do jednorazowego, krótkotrwałego zastosowania;
 przy przechowywaniu w zamkniętym opakowaniu: 3 lata.
 Rozmiar (składana): 106,7 mm x 155 mm
 Nr art.: 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)
 Przechowywanie: suche, < 80% wilgotności, od -30°C do +50°C

PL

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA

- Przytrzymaj półmaskę filtrującą cząstką w pozycji nad nosem i ustami.
- Przeciągnij tasiełki mocujące za uszy, przymocuj je do klipsa mocującego, aby odczuwałoby było poczucie komfortu i nie było nieszczelności.
- Upewnij się, czy klips na nos jest bezpiecznie uformowany wokół nosa, oprzyj jego koniec na policzkach, aby uzyskać dobre uszczelnienie.
- Aby sprawdzić prawidłowe dopasowanie, przyłóż obie ręce do maski i energicznie wypuść powietrze. Jeśli powietrze ucieka wokół nosa, dociśnij klips na nos, jeśli powietrze wydostaje się wokół krawędzi maski, ściśnij tasiełki, aby maska lepiej przylegała.
- Powtarzaj regulowanie, aż maska będzie właściwie uszczelniona.
- Jeśli nie można uzyskać właściwego uszczelnienia, nie należy wchodzić do zanieczyszczonego obszaru, ponieważ może to doprowadzić do choroby.



SI

NAVODILA ZA NAMESTITEV

- Masko držite čez nos in usta.
- Naglavna trakova potegnite čez ušesa in trakova pritrdite na sponko. Prilagodite pritganje in preverite tesnost.
- Nosno sponko nastavite tako, da se vam prilega okrog nosu in prilagodite konce oz. lica, da ustvarite dobro tesnjenje.
- Za preverjanje tesnjenja z obema rokama pokrijte masko in močno izdihnite. Če pride do uhajanja zraka v predelu nosu, pritisnite nosno sponko močneje, pri uhajanju zraka na straneh pa prilagodite naglavna trakova.
- Prilagajanja ponavljajte, dokler maska ni tesna.
- Če maska ni tesna, ne vstopajte v onesnaženo območje, ker obstaja nevarnost okužbe.

Navodila za uporabnika

Neupoštevanje navodil za uporabo in opozoril za to masko lahko zmanjša njeno učinkovitost in lahko privede do boleznih in invalidnosti. Izvod izjave o skladnosti je priložen vsaki komercialni velikosti embalaže. Kot pri vsaki opremi za zaščito dihal se mora uporabnik pred vsako uporabo ustrezno usposobiti. Uporabniki morajo pred namestitvijo vedno preveriti, če je maska v dobrem stanju za uporabo in brez nečistoč, poškodb na naglavni trakovni itd.

Omejitve

V naslednjih okoliščinah ne smete uporabljati masko za zaščito dihal oz. ne smete vsopati oz. ostati v onesnaženem območju:

- Zrak okolja vsebuje manj kot 19,5 % kisika.
- Vohate ali okusite škodljivo snov.
- Za zaščito pred plini in hlapci.
- Škodljive snovi ali njihove koncentracije so neznane oz. neposredno škodljive za življenje in zdravje.
- Pri peskanju, barvanju s pršenjem in obdelavi z azbestom.
- Pod eksplzivno atmosfero.

Opozorila

- Ta maska, opremljena z znakom „NR“, je namenjena za enkratno uporabo.
- Konfiguracija, ki jo je navedel proizvajalec, se ne sme nikoli zamenjati oz. spreminiti in nobenih komponent ni dovoljeno dodajati ali izpušati.
- Maska pomaga pri zaščiti pred določeni onesnaževalci z delci, vendar v celoti ne preprečuje tveganja za okužbo ali infekcijo.
- Če obrazne dlake pridelo pod obrazno zatesnitev, zahtevate glede tesnosti morda ne bodo izpolnjene.
- Masko zamenjajte takoj, če je dihanje oteženo ali če je maska poškodovana oz. deformirana.
- Masko zamenjajte, če ni mogoče doseči tesnosti na obrazu.

Shranjevanje

- Pri neuporabi masko shranjujte v tesni posodi izven onesnaženih območij.
- Med prevozom masko hranite v originalni embalaži.

Stopnja zaščite: FFP2 NR s kategorijo zaščite 95 %
Rok trajanja: predvideno za enkratno kratkoročno uporabo;
pri skladiščenju v zaprti vrečki: 3 leta.
Velikost (zložen): 106,7mm x 155mm
Št. art. 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)
Skladiščenje: skladiščite na suhem mestu, <80% ravnice vlažnosti, na 30°C do +50°C

Pokyny pre užívateľu

Nerešpektávaním pokynov na používanie a výstražných pokynov pre túto masku sa môže znížiť účinnosť masky a prídanie sa môžete nakaziť alebo Vám bude maska prekážať. Konformitné vyhlásenie je priložené v každom bežnom balení. Tak ako v prípade každého ochranného dýchacieho prístroja musí byť používateľ najskôr adekvátne poučený. Skôr ako si masku nasadíte, vždy sa uistite, či maska nie je poškodená, znečistená, či nie sú poškodené pásy atď.

Ohradenie

Ochrannú dýchaciu masku nepoužívajte, resp. nevstupujte do kontaminovaného priestoru, ani sa v ňom nezdržiavajte za týchto okolností:

- Okolity vzduch obsahuje menej ako 19,5 % kyslíka.
- Čuchom alebo chuťou cítite prítomnosť škodliviny.
- Na ochranu proti plynom alebo výparom.
- Nie sú známe škodliviny alebo ich koncentrácie, resp. tieto priamo ohrozujú život alebo zdravie.
- Pri peskaní, striekaní farieb a práčach s azbestom.
- Vo výbušnej atmosfére.

Výstražné pokyny

- Táto maska označená značkou „NR“ je určená na jednorazové použitie.
- Výrobcom zadanú konfiguráciu nikdy nenahradzujte ani nemodifikujte, neprévajte, ani neodstraňujte žiadne komponenty.
- Táto maska pomáha pri ochrane pred určitými kontaminovanými časticami, avšak celkom nevylučuje riziko náklady alebo infekcie.
- Ak sa chlpy na tvári dostanú pod tesnenie, maska už nemusí dobre tesniť.
- Maska si ihneď vymeňte, ak sa Vám ťažko dýcha, alebo ak je maska poškodená alebo zdeformovaná.
- Maska vymeňte, ak maska na tvári nedostatočne tesní.

Skladovanie

- Keď masku nepoužívate, skladujte ju v dobre uzatvorenej nádobe mimo znečistených priestorov.
- Masku počas transportu skladujte v originálnom obale.

Stupeň ochrany: FFP2 NR so stupňom filtrácie 95 %
Životnosť: určené na jednorazové krátkodobé použitie;
pri skladovaní v uzatvorenom vrecku: 3 roky.
Rozmer (zložený): 106,7 mm x 155 mm
Vyr. č.: 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)
Skladišovanie: na suchom mieste, <80 % vlhkost vzduchu, -30 °C až +50 °C

SK

NAVOD NA PRÍLOŽENIE

- Polomasku si pridržte na nose a ustach.
- Pásy si založte za uši a zapnite ich sponou. Masku si napravte a skontrolujte, či prilieha.
- Nosovú sponu prispôbte tak, aby bezpečne prilieha na nos a konce prítlačte na lica, aby maska dobre priliehala.
- Tesnosť skontrolujete tak, že obidvomi rukami pridržte masku a intenzívne vydychnete. Ak z okolia nosa uniká vzduch, pevnejšie prítlačte nosovú sponu. Ak vzduch uniká na bokoch, prispôbte hlavové pásy.
- Toto opakuje dvody, pokiaľ nebudete maska dobre tesniť.
- Ak maska netesní, do kontaminovaného priestoru nevstupujte, pretože by ste sa mohli nakaziť.



HU

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

1. Tartsa a felszámot az orrárt és a fejét fedő helyzetben.
2. Vezesse át a szalagokat a füle mögött. A feji szalagot rögzítse a tartósathoz. Állítsa be a viseletet kényelmesre és kerülje el a szivárgást.
3. Győződjön meg arról, hogy az orrfedő rész biztonságosan borítja be az orrot fedő rész biztosan rögzül és annak végei jól zárnak az arcrésznél is.
4. A megfelelő illeszkedés ellenőrzéséhez a kezével csúsztatja képeze feje át a maszkot és lélegezzen intenzíven. Ha szivárgást észlel az orrnál, szorítsa az orrot fedő részét. Ha a levegő a széléknél szivárog, akkor igazítsa meg a fejrögzítő madzagokat.
5. Ismételje meg az igazításokat mindaddig, míg a maszk nem rögzül megfelelően.
6. Ha a megfelelő rögzülés nem érhető el, akkor ne lépjen be szennyezett területre. Ellenkező esetben megbetegedhet.

Használati útmutató

Az útmutatóban foglaltak és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása a maszk használata során csökkentheti a maszk hatékonyságát és az betegségekhez vagy egészségkárosodáshoz vezethet. A megelőzésről nyilatkozat másolatát minden legkisebb kereskedelmi csomagoláson megtalálja/ezekhez csatolásra kerül. Mint minden légvédelmi felszerelés esetén, a viselőt meg kell tanítani a használat megkezdése előtt. A használat megkezdése előtt a viselőt ellenőrizze a maszk jó állapotát. Ne legyen rajta szennyeződés, a szjak ne legyenek károsodtak stb.

Korlátozások

Ne használják a légvédelmet, ill. ne lépjenek azzal szennyezett területekre, ha a következő körülmények bármelyike fennáll:

1. A légkör 19,5 %-nál kevesebb oxigént tartalmaz.
2. Ha a szennyezett anyag szagát vagy ízet érzzi.
3. Gázok és gőzök elleni védekezéséknél.
4. Ha a szennyeződések vagy azok koncentrációját nem ismerik, avagy azok közvetlen feltételeknek az emberi életre vagy egészségre.
5. Homokszóráshoz, festékpemeléshez és aszteszt kezeléshez nem használható.
6. Robbanásveszélyes terekben nem használható.

Figyelmeztetések

1. A maszkon lévő „NR” jelölés az egyszer használhatóságra utal.
2. Soha ne cserélje ki, ne módosítsa, ne adjon hozzá és ne vegyen le alkatrészeket a gyártói specifikációk szerinti konfigurációról vagy ahhoz.
3. A maszk bizonyos részecskeszennyeződések elleni védelemén segít, de nem képes teljesen kiküszöbölni a megbetegedések vagy fertőzések kockázatát.
4. Nem valószínű, hogy a szivárgási követelmények teljesülnek, ha arcszűrőt kerül az arczáró részek alá.
5. A maszkot azonnal cserélni kell, ha a légzés nehézkessé válik vagy a maszk károsodik vagy eltorzul.
6. Cserélje a maszkot, ha az arc megfelelő fedés nem érhető el.

Tárolás

1. A maszkot lezárt konténerben tárolják, a szennyeződött területektől távol, ha nem használják azt.
2. A maszkot a szállítás során az eredeti csomagolásban kell tárolni.

Védelmi osztály: FFP2 NR 95 %-os szűrési hatékonysággal
Minőségét megőrzi: egyszerű, rövid ideig tartó használatra készült;
zárt tasakban tárolva: 3 évig.
Méret (összehajva): 106,7 mm x 155 mm
Cikkszám: Sz: 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)
Tárolás: száraz helyen, <80% páratartalom, -30 °C és +50 °C között

Informacije za korisnike

Nepriđržavanje uputa za uporabu i upozorenja vezanih za ovu masku može dovesti do smanjenja njene učinkovitosti i mogućih oboljenja ili invalidnosti. Sve veličine komercijalnih pakiranja sadrže jedan primjerak izjave o sukladnosti. Kao i kod svake zaštitne opreme za disanje, prije korištenja nositelji mora dobiti odgovarajuću obuku. Prije postavljanja maske korisnici uvijek moraju provjeriti njenu ispravnost – bez nečistoća, bez oštećenja na trakama za glavu itd.

Ograničenja

- Nemojte koristiti zaštitnu masku za disanje, odnosno ulaziti ili boraviti u onečišćenom prostoru pod slijedećim uvjetima:
1. Okolni zrak sadrži manje od 19,5 % kisika.
 2. Možete osjetiti miris ili okus štetne tvari.
 3. Za zaštitu od plinova ili para.
 4. Štetne tvari ili njihova koncentracija su nepoznati odnosno izravno ugrožavaju život ili zdravlje.
 5. Kod pjeskarenja, raspršivanja boje i obrađivanja azbestom.
 6. U eksplozivnoj atmosferi.

Upozorenja

1. Ova maska s oznakom „NR”, namijenjena je jednokratnoj uporabi.
2. Konfiguracija koja je utvrđena od proizvođača nipošto se ne smije zamjenjivati, odnosno mijenjati, a sastavni se dijelovi ne smiju dodavati ili izostavljati.
3. Ova maska pomaže pri zaštiti od onečišćenja određenim česticama, ali ne uklanja u potpunosti opasnost od zaraze.
4. Ukolklo diake lica dospju pod brtvu za lice, zahtjevi za nepropusnost se eventualno neće moći ispuniti.
5. Smjesta zamjenite masku ukoliko disanje postane otežano ili se maska ošteti, odnosno deformira.
6. Zamijenite masku ako se ne može postići ispravno brtvljenje lica.

Skладиštenje

1. Za vrijeme nekoristenja masku držite u nepropusnom spremniku izvan onečišćenih prostora.
2. Tijekom transporta masku čuvajte u originalnom pakiranju.

Razina zaštite: FFP2 NR sa stupnjem zaštite od 95 %
Trajnost: predviđena za jednokratnu kratkotrajnu upotrebu; u slučaju skladištenja u zatvorenoj vrećici: 3 godine.
Veličina (sklopljena): 106,7mm x 155mm
Proizvod br.: 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)
Skладиštenje: Na suhom, <80% vlažnost zraka, -30°C do +50°C

HR

UPUTE ZA POSTAVLJANJE

1. Držite polumasku u položaju iznad nosa i usta.
2. Povucite trake za glavu iza ušiju i pričvrstite ih kopčom. Popravite udobnost prijanjanja te provjerite propusnost polumaskе.
3. Nosnu kopču sigurno priljubite uz nos, a njene rubove prislonite na obrabe kako bi se osiguralo dobro brtvljenje.
4. Za provjeru propusnosti stavite obje ruke iznad maske i snažno izdahnite. Ako zrak izlazi iz nosnog prostora, pričvrstite nosnu kopču. Ako zrak izlazi oko rubova, prilagodite trake za glavu.
5. Ponavljajte ovaj postupak sve dok ne postignete nepropusnost maske.
6. Ako je maska prozupna, ne ulazite u onečišćeni prostor jer u suprotnome postoji opasnost od zaraze.



RO

Индикации реферitoare aplicare

1. Țineți masca peste nas și peste gură.
2. Poziționați benzile în spatele urechilor și treceți benzile prin clemă. Adaptați poziția și verificați etanșeitatea.
3. Adaptați clemă pentru și verificați etanșeitatea. Nu sunt astfel încât să stea în siguranță în jurul nasului și mulți capetele pe obraji pentru a obține o etanșeitate bună.
4. Pentru verificarea etanșeității Țineți ambele mâini deasupra măștii și expirați puternic. Dacă aerul iese din orificiul nazal, apăsați mai bine pe clemă pentru nas, dacă aerul iese pe laterale adaptați benzile pentru cap.
5. Repetați reglajele până când masca este etanșă.
6. Dacă masca nu este etanșă, nu intrați în zona impură deoarece există pericolul de infectare.

Индикаții de utilizare

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și a indicațiilor de avertizare referitoare la această mască poate duce la reducerea eficienței și după caz la boli sau handicap.
O copie a declarației de conformitate se găsește în fiecare dimensiune de ambalaj disponibil în comerț. La fel ca în cazul fiecărui dispozitiv de protecție respiratorie, purtătorul trebuie instruit corespunzător înainte de utilizare. Utilizatorul trebuie să verifice înainte de aplicare dacă masca este într-o stare bună de funcționare și nu are impurități, daune pe benzile de pe cap, etc.

Limitare

Nu trebuie să folosiți masca de protecție în următoarele condiții: nu, trebuie să intrați într-o zonă contaminată resp. să rămâneți acolo.

1. Aerul înconjurător conține mai puțin de 19,5% oxigen.
2. Mirosii sau gustul o substanță dăunătoare.
3. Pentru protecția împotriva gazelor sau a vaporilor.
4. Substanțele dăunătoare sau concentrațiile acestora sunt necunoscute resp. sunt dăunătoare pentru viață sau sănătate.
5. În cazul sablării cu nisip, a pulverizării cu vopsea și a tratării cu azbest.
6. În atmosfere explozibile.

Avertizări

1. Această mască prevăzută cu simbolul "NR" este destinată uzului unic.
2. Configurația menționată de producător nu trebuie înlocuită resp. modificată și nu trebuie introduse sau omise componente.
3. Această mască ajută la protecția împotriva anumitor impurități de particule, dar nu previne complet riscul de contaminare sau de infectare.
4. Dacă până la facial pătrunde sub suprafața etanșă, cerințele de etanșeitate nu sunt îndeplinite.
5. Schimbați imediat masca, dacă vă este greu să respirați sau dacă masca este deteriorată sau deformată.
6. Schimbați masca dacă etanșeitatea nu este atinsă deasupra măștii.

Depozitare

1. Depozitați masca în cazul neutilizării într-un recipient deasupra zonelor impure.
2. Depozitați masca în timpul transportului în ambalajul original.

Nivel de protecție: FFP2 NR D cu grad de protecție 95%
Valabilitate: pentru utilizare pe termen scurt, de unică folosință; a se depozita doar într-o pungă închisă: 3 ani.
Dimensiuni (plată): 106,7mm x 155mm
Nr. art. 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)
Depozitare: uscată, <80% umiditatea aerului, -30°C până la +50°C

BG

Указания за потребителя

Неспазване на инструкциите за употреба и дуплеритните указания за тази маска може да доведе до намаляване на нейната ефикасност и евентуално до болести или увреждания. Копие на декларацията за съответствие е приложено към всеки предпаляган в търговската мрежа размер на опаковката. Като при всеки респираторен уред носещото лице трябва да бъде обучено съответно преди употреба. Потребителят трябва преди всяко поставяне да проверят, дали маската е в добро състояние за употреба, дали е чиста от замърсявания, дали няма повреди по лентите за глава и т.н.

Ограничение

При следните обстоятелства не трябва да използвате защитната дихателна маска, resp. не трябва да влизате или да оставате в замърсена зона:

1. Околният въздух съдържа по-малко от 19,5% кислород.
2. Помисривате или вкисвате вредното вещество.
3. За защита срещу газове или изпарения.
4. Вредните вещества или техните концентрации са неизвестни или непосредствено опасни за живота или здравето.
5. При пясъкоструене, пръскане с боя и третираня с азбест.
6. При експлозивна атмосфера.

Предупредителни указания

1. Тази снабдена със знака „NR“ маска е предназначена за еднократна употреба.
2. Зададената от производителя конфигурация не трябва да се сменя или модифицира, както и не могат да се добавят или отстраняват компоненти.
3. Тази маска помага при защита от определени замърсявания с частици, но не предотвратява напълно риска от заразяване или инфекция.
4. Ако лицето окосмяване попадне под уплътнението за лицето, е вероятно измъкванията за непропукувост да не бъдат изпълнени.
5. Незабавно сменете маската, ако дишането Ви е затруднено или маската бъде повредена или деформирана.
6. Сменете маската, ако непропукувост върху лицето не може да бъде постигната.

Съхранение

1. Когато не използвате маската я съхранявайте в пълтен контейнер извън замърсените зони.
2. По време на транспорт съхранявайте маската в оригиналната опаковка.

Ниво на защита: FFP2 NR D със степен на защита 95%
Срок на годност: продуктът е предвиден за еднократна кратковременна употреба; при съхранение в затворена торбичка: 3 години.
Размер (опъната): 106,7mm x 155mm
Art. Nr.: 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)
Съхранение На сухо, <80% влажност на въздуха, -30°C до +50°C

Указания за поставяне

1. Поставете полумаската върху носа и устата.
2. Издърпайте лентите за глава зад ушите и закачете лентите към шипката. Регулирайте положението и проверете непропукувостта.
3. Регулирайте шипката за нос така, че да лежи сигурно около носа, и сирибете краищата към бузите, за да получите добра непропукувост.
4. За проверка на непропукувостта поставете двете ръце върху маската и издишайте силно. Ако от местото около носа излиза въздух, притиснете шипката за нос по-силно, а при излизане на въздух отстраняване, регулирайте лентите за глава.
5. Повтаряйте настройките, докато маската е непропукува.
6. Ако маската не е непропукува, не влизайте в замърсената зона, защото в противен случай има опасност от заразяване.



EE

Pealepanemise juhised

1. Hoidke poolmask nina ja suu kohal.
2. Tõmmake peapaelad kõrvade taha ja kinditage pealad klambri külge. Reguleerige istuvust ja kontrollige tihedust.
3. Kohandage ninaklambrit nii, et see oleks kindlalt nina ümber ja suruga otsad pöskede vastu, saavutamaks head tihedust.
4. Tiheduse kontrollimiseks hoidke mõlemad kät maski kohal ja hingake tugevalt välja. Kui nina juurest tuleb välja õhku, vajutage ninaklambri tihedamalt peale; kui külgedelt tuleb välja õhku, reguleerige peapaelasid.
5. Korrake reguleerimistöö saavutades, kuni mask istub tihedalt.
6. Kui mask ei ole tihe, ärge sisenega saastunud ruumi, kuna vastasel juhul valitseb nakatumisohut.

Kasutusjuhised

Antud maskiga seotud kasutusjuhiste ja hoiatuste eiramine võib vähendada selle tõhusust ning kaasa tuua haigusi või puudeid. Vastavastavaldus on kaasa pandud igale kaubanduses saadaleava suruseege pakendile. Nagu iga hingamisteede kaitsevaheni puhul peab kandja olema enne kasutamist vastavalt koolitatud. Kasutaja peab enne maski pealepanemist alati kontrollima, kas mask on heas seisukorras ja puhas ning kas peapaeltel vm ei esine kahjustusi.

Pirang

Järgmistest tingimustest ei tohi hingamisteede kaitsemaski kasutada; siseneda saastunud alale ega sellel viibida:

1. Ümbristev õhk sisaldab alla 19,5% hapnikku.
2. Tunnete haistmis- või maitsemelega kahjulikku ainet.
3. Kaitseks gaaside või aurude eest.
4. Kahjuliku ained või nende kontsentratsioon on teadmata või kujutavalt endast vahetult ohtu elule ja tervisele.
5. Liiva prõksimisel, värvi puhustamisel või asbesti töötlemisel.
6. Plaatvatsutiikus keskkonnas.

Hoiatusjuhised

1. See, margiga „NR“ varustatud mask on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.
2. Tootja poolt ettenähtud konfiguratsioon ei tohi kunagi asendada ega muuta ning ühtegi komponenti ei tohi lisada ega eemaldada.
3. See mask aitab kaalista teatud osakeste saaste eest, kuid ei kõrvalda täielikult nakkusi- või infektsiooniohtu.
4. Kui nõakatte alla satuvad nõakarvad, ei pruugi tiheduse nõuded enam täidetud olla.
5. Vahetage mask kohe välja, kui tekib raskusi hingamisel või kui mask on kahjustatud või deformeerunud.
6. Vahetage mask välja, kui tihedust ümber näo pole võimalik saavutada.

Hoiustamine

1. Kui maski ei kasutata, hoidke seda tihedalt suletud mahutis, saastunud pirkondadest eemal.
2. Hoidke maski transpordis ajali originalpakendis.

Kaitseklass: FFP2 NR D, kaitseaste 95% Sallivusaeg: ette nähtud ühekordseks lühiajaliseks kasutamiseks; suletud kotis säilitamiseks, 3 aastat.
Suurus (võrdluna): 106,7 mm x 155 mm
Toote nr: 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)
Hoiustamine: kuivas, <80% õhniiskuss, -30 °C kuni +50 °C

LV

Lietotāja instrukcijas

Šīs maskas lietošanas instrukciju un brīdinājumu neievērošana var samazināt maskas efektivitāti un, iespējams, izraisīt slimības vai invaliditāti. Katram komerciepakojumam ir pievienota atbilstības deklarācijas kopija. Tāpat kā jebkuras citas elpošanas iekārtas gadījumā pirms lietošanas lietotājam ir jābūt atbilstoši apmācītam. Lietotājiem pirms maksas uzvilšanas vienmēr jāpārbauda, vai tā ir labā stāvoklī un nesatur piesārņojumus, galvas saites nav bojātas, u.t.

Ierobežojums

Nelietojiet elpošanas aizsargmasku un neienāciet un neatrodiet piesārņotā vietā šādos gadījumos:

1. Apkārtējā gaisā ir mazāk nekā 19,5% skābekļa.
2. Jūs saozāt piesārņojošu vielu vai sajūtat tās garšu.
3. Aizsardzībai pret gaziem vai tvaikiem.
4. Piesārņojošas vielas vai to koncentrācija nav zināma, un līdz ar to nav zināms, vai tā ir tieši bīstama dzīvībai un veselībai.
5. Veicot smilšstrūkrošanu, smidzinot krāsu un atsprādājot azbestu.
6. Sprādzienbīstamā atmosfērā.

Brīdinājuma norādes

1. Šī maska, kas marķēta ar apzīmējumu „NR“, ir paredzēta vienreizējai lietošanai.
2. Ražotāja norādīto konfigurāciju nekad neizmantojiet aizstāt vai mainīt, kā arī nedrīkst pievienot vai neizņemt jebkādas elementus.
3. Šī maska palīdz aizsargāties pret noteiktām piesārņojošu vielu daļiņām, bet pilnībā nenovērš inficēšanās risku vai infekciju.
4. Ja sejas mati nokļūst zem sejas blīvējuma, hermētiskuma prasības netiek izpildītas.
5. Nekavējoties nomainiet masku, ja jums ir grūti elpot vai ja maska ir bojāta vai deformēta.
6. Nomainiet masku, ja nav iespējams sasniegt hermētiskumu virs sejas.

Glabāšana

1. Kad masku nelieto, glabājiet to hermētiskajā konteinerā, prom no piesārņojošām vietām.
2. Pārvašanās laikā glabājiet masku oriģinālā iepakojumā.

Aizsardzības pakāpe: FFP2 NR D ar 95% aizsardzības pakāpi Derīguma termiņš: paredzēta vienreizējai lietošanai; uzglabājot slēgtā ietā mēiņā: 3 gadi.
Izmērs (salocītā stāvoklī): 106,7 mm x 155 mm
Preces Nr.: 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)
Glabāšana: sausā vietā, gaisa mitrums: < 80%, no -30°C līdz +50°C

Norādījumi par uzvilksānu

1. Turiet pusmasku pie deguna un mutēs.
2. Paveiciet galvas saites aiz ausīm un sastipriniet tās ar spraudni. Noregulējiet pieguļšanas stāvokli un pārbaudiet hermētiskumu.
3. Pielāgojiet deguna spraudni tā, lai tā cieši pieguļtu degunam, un piespiediet galus pie vaigiem, lai sasniegtu vajadzīgu hermētiskumu.
4. Lai pārbaudītu hermētiskumu, turiet abas rokas pie maskas un spēcīgi izelpojiet. Ja gaisa izplūst no deguna dobuma, stingrāk nospiediet deguna spraudni; ja gaisa izplūst sānos, noregulējiet galvas saites.
5. Atkārtojiet noregulēšanu, līdz maska cieši pieguļ.
6. Ja maska nepieguļ cieši, nelenāciet piesārņotājā vietā, pretējā gadījumā pastāv inficēšanās risks.



LT

Nurodymai kaip užsidėti

1. Laikykite puskaukę pridėjus prie nosies ir burnos.
2. Galvos juostas traukite už ausų, ir jas susėkite lipduku. Pritvirtinkite pagal savo poreikius ir patikrinkite sandarumą.
3. Nosies spaustuką nustatykite taip, kad jis apgaubtų nosį ir galus užtępkite ant skruostų, kad būtų užtikrintas sandarumas.
4. Tikrindami sandarumą abi rankas uždėkite ant kaukės ir stipriai iškvėpkite orą. Jeigu oras skverbiasi per nosies spaustuką, tuomet į pritvirtinkite stipriau, šonuose priveržkite galvos juostas.
5. Pritaikykite tol, kol kaukė sandariai prigulus.
6. Jeigu kaukė nesandariai, neikite į užterštą sritį, nes kyla pavojus užsikrešti.

Nurodymai naudotojui

Šios kaukės naudojimo instrukcijų ir įspėjamųjų nurodymų nepaisymas mažina jos efektyvumą ir tam tikrais atvejais gali sukelti ligas arba negalą. Kiekvienas standartinis pakuočės dydis turi paruoštą atitikties deklaraciją. Prieš naudodamasis bet kurį kvėpavimo takų apsaugos prietaisą taip ir prieš naudojimą šį, dėvintis asmuo turi būti apmokytas. Prieš užsidėdamas kaukę naudotojas visomet turėtų patikrinti, ar kaukė yra tinkamos naudoti būklės, ar ant jos nėra nešvarumų, nepažeistos galvos juostos ir kt.

Ribojimas

Draudžiama naudoti apsauginę kvėpavimo takų kaukę arba draudžiama įžengti į nešvarią sritį ar joje pasilikti esant tokioms aplinkybėms:

1. Aplinkos ore yra mažiau nei 19,5% deguonies.
 2. Kvėpuojate arba ragaujate kenksmingame medžiagos.
 3. Apsisaugoti nuo dujų ir garų.
 4. Nežinomos kenksmingos medžiagos ir jų koncentracija arba jos kelia tiesioginį pavojų gyvybei ir sveikatai.
 5. Smėliuojant, purškiant dažus ir dirbant su aštriu.
 6. Sprogioje aplinkoje.
- Įspėjamieji nurodymai**
1. Ši „NR“ ženklui pažymėta kaukė yra vienkartinė.
 2. Gamintojo pateikta konfigūracija negali būti pakeista arba modifikuojama, draudžiama pridėti arba nuimti komponentus.
 3. Ši kaukė padeda apsaugoti nuo tam tikrų taršių dalelių, tačiau nesumazina rizikos užsikrešti arba patekti infekcijai.
 4. Jeigu ant veido augantys plaukai patenka po veido apvardu, sandarumo reikalavimai nevykdomi.
 5. Nedelsdami pakeiskite kaukę a, jeigu Jums sunku kvėpuoti arba kaukė pažeista ar deformuota.
 6. Pakeiskite kaukę kita, jeigu ji neužtikrina sandarumo veido srityje.

Laikymas

1. Jeigu kaukės nenaudojate, laikykite ją sandarioje talpoje už terštos srities ribų.
2. Gabendami kaukę laikykite originalioje pakuočėje.

Apsaugos lygis: FFP2 NR D, apsaugos lygis – 95 %
Tinkamumas naudoti: skiria vienkartiniams, trumpalaikiams naudojimui;

laikyti uždareme maišelyje; 3 metal.
Dydis (Blankstlytos): 106,7 mm x 155 mm
Gamio Nr.: 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)

Laikymo sąlygos: sausoje vietoje, + 80 °C oro drėgnis, + 30° C iki +50° C

RU

Указания по применению

Несоблюдение инструкций по применению и предупредительных указаний для этой маски может привести к снижению ее эффективности и, при определенных условиях, к заражению или загрязнению. Эквивалентная деградация соответствия прилагается к каждому продаваемому размеру упаковки. Как и в случае любого респираторного устройства, пользователь должен пройти инструктаж перед применением. Пользователь должен проверить перед каждым надеванием, находится ли маска в надлежащем состоянии, не имеет ли она загрязнений и повреждений тесемки и т.п.

Ограничения

- При следующих условиях запрещено использование фильтрующей защитной маски либо посещение загрязненной зоны или нахождение в ней:
1. В окружающем воздухе имеется менее 19,5 % кислорода.
 2. Вы чувствуете обонянием или на вкус вредное вещество.
 3. Для защиты от газов и паров.
 4. Неизвестны вредные вещества или их концентрация, либо они опасны для жизни или здоровья.
 5. При пескоструйной обработке, окраске распылением и работах с абестом.
 6. Во взрывоопасной среде.

Предупреждения, указание маркировки

1. Настоящая маска, имеющая маркировку „NR“, предназначена для одноразового применения. Предусмотренную изготовителем комбинацию запрещено заменять либо модифицировать, а также запрещено добавлять или убирать компоненты.
2. Данная маска помогает защитить от определенных частиц, но не предотвращает полностью риск заражения или инфицирования.
3. Если волосы лица попадают под маску, то, при определенных условиях, не выполняются требования к плотному прилеганию.
4. Немедленно замените маску, если Вам становится тяжело дышать, либо если маска повреждена и деформирована.
5. Замените маску, если невозможно добиться плотности прилегания к лицу.

Хранение

1. Храните маску при напирменении в плотно закрытой таре за пределами загрязненной зоны.
2. Храните маску во время транспортировки в оригинальной упаковке.

Инструкция по надеванию

1. Удерживайте полумаску в области носа и рта.
2. Заведите тесемки за уши и закрепите за скобу. Поправьте положение маски и проверьте плотность прилегания.
3. Поправьте носовую зажим так, чтобы он прилегал к носу, и прижмите концы к щекам для обеспечения хорошей плотности прилегания.
4. Для проверки плотности прилегания приложите обе руки к маске и сильно выдохните. Если воздух выходит из носовой зоны, подомните носовой зажим, при выходе воздуха со сторон подрегулируйте тесемки.
5. Повторите подгонку до тех пор, пока маска не будет плотно прилегать.
6. В случае если маска не прилегает плотно, не входите в загрязненную зону, так как в противном случае существует опасность заражения.

Уровень защиты: FFP2 NR со степенью защиты 95 %

Срок годности: изделие предназначено для кратковременного одноразового использования; при хранении в закрытом пакете: 3 года.

Размер (в сложенном виде) 106,7 мм x 155 мм

Art. № 33333 (VPE 10), 33335 (VPE 5)

Хранение: в сухом месте, при относительной влажности <80%, от -30°C до +50°C